

Sıkça Sorulan Sorular

Q dakik hasta takip Vazgeç



➤ Uygulamayı Nasıl İndirebilirim?
Uygulamayı App Store'dan "Dakik Hasta Takip" yazarak veya Google Play'den "Dakik Hasta Takip" yazarak indirebilirsiniz.



Resim 1



Dakik - Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Map2heal Health Tourism and Software Limited

3.2★
8 yorum

24 MB

PEGI 3

1B+
İndirme

Yükle



Bu uygulama hakkında →

Doktorunuz sizi evinizden takip etsin hastane sonrası da güvende olun.

Sağlık ve Fitness

Bu uygulamaya puan verin

Düğüncelerimizi diğer kişilerle paylaşın



Yorum yazın


Kullanıcı oyları ve yorumlar ⓘ →



Resim 2

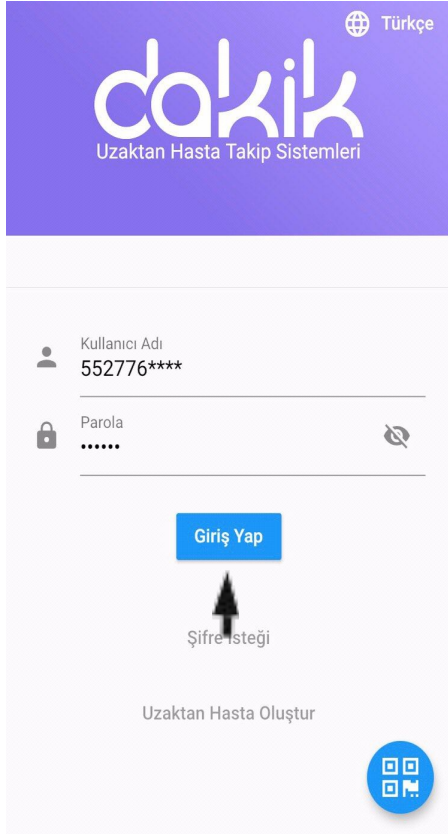➤ Uygulamayı Nasıl İndirebilirim?
Dakik Uygulamayı Play Store'den "Dakik Hasta Takip Sistemi" olarak indirebilirsiniz.






Resim 3

Uygulamaya Nasıl Giriş Yapabilirim?

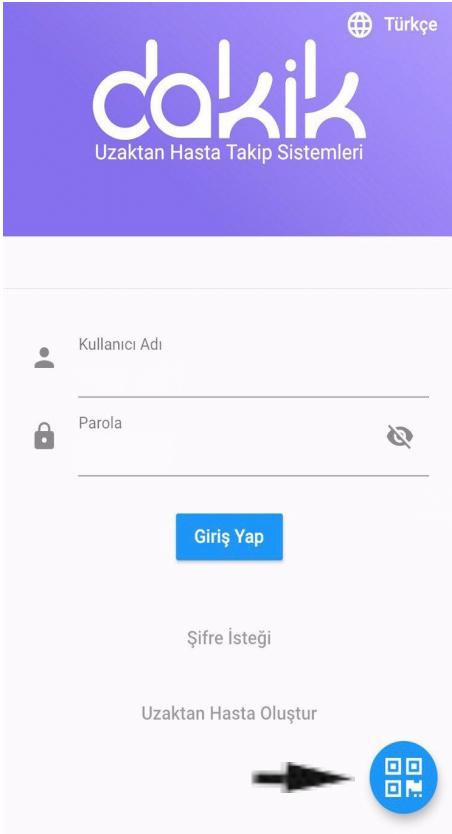- Yukarıdaki resimler gibi Yükleddikten Sonra Kullanıcı Adı ve Şifresini soran bir ekran gelecektir. Daha önceden SMS olarak gönderilen Kullanıcı Adı ve Şifresini girdikten sonra "Giriş Yap" tuşuna basıp uygulamaya giriş yapabilirsiniz (Resim 3).



Resim 4

- Veya ➡ işareti ile gösterilen mavi tuşa basılıp karekod okutularak da sisteme giriş yapılabilir. Karekod (QR Kodu) sizlere Kullanıcı Adınız ve Şifreniz ile birlikte verilecektir (Resim 4).



Resim 5

- Karekod (QR Kodu) Okuttuktan sonra uygulamaya giriş yapabilirsiniz (Resim 5).




Resim 6


➤ İçtiğim İlaçlarımı Sisteme Nasıl Gireceğim?
Bu soruların cevapları için önceki bölümlerde öğrendiğimiz ilaçlar (etken madde), dozaj, sıklık, gün, saat, ilaç türü, ilaç açılış türü, ilaçlar



Doktor veya Hemşire ile Nasıl İletişime Gececeğim?

- Yanda  işaretiyle gösterilen mavi mesaj butonuna basılarak önümüze gelen "Doktor ve Asistan" yazısına da tıklayarak mesaj platformuna erişebilirsiniz (Resim 7).

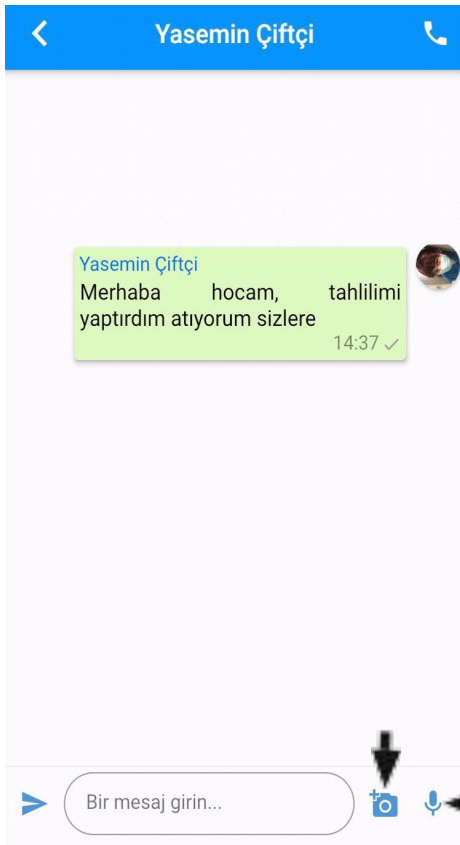
Resim 7



Resim 8


Fotoğraf veya ses kaydı da gönderebilir miyim?

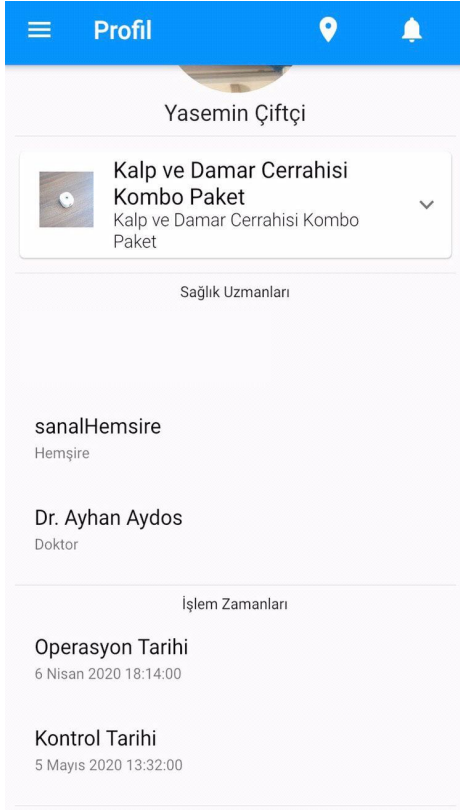
- Kamera işareti olan yere tıklayıp Kamera veya Galeri seçeneklerinden fotoğraf gönderebilirsiniz. Hemen yanındaki mikrofon işaretinden de ses kaydı yapıp gönderebilirsiniz (Resim 8).



Resim 9



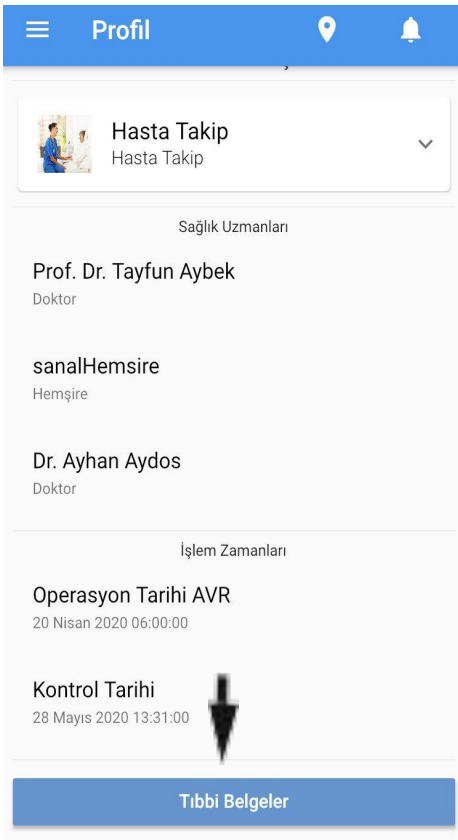Profilime Nasıl Ulaşabilirim?

- Açılır menüden  butona basarak Profil Sekmesine tıklayarak geçebilirsiniz. Profilde; Paket Adı, Sağlık Uzmanları, Tıbbı Belgeler, İşlemlerle alakalı tarihler yer almaktadır (Resim 9).




Resim 10

Tıbbi Belgelerime Nasıl Ulaşabilirim?

- Açılır menüden  butona basarak Profil Sekmesine tıklayarak geçebilirsiniz. En altta  işaretiyle gösterilen “Tıbbi Belgeler” butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz (Resim 10).




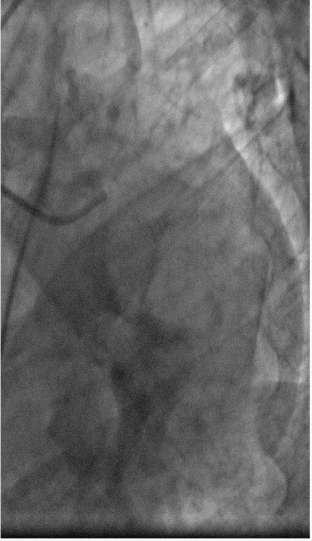1/9 Dicom 62 items




- Burada belgelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Yana kaydırarak bütün hepsini görebilirsiniz (Resim 11).

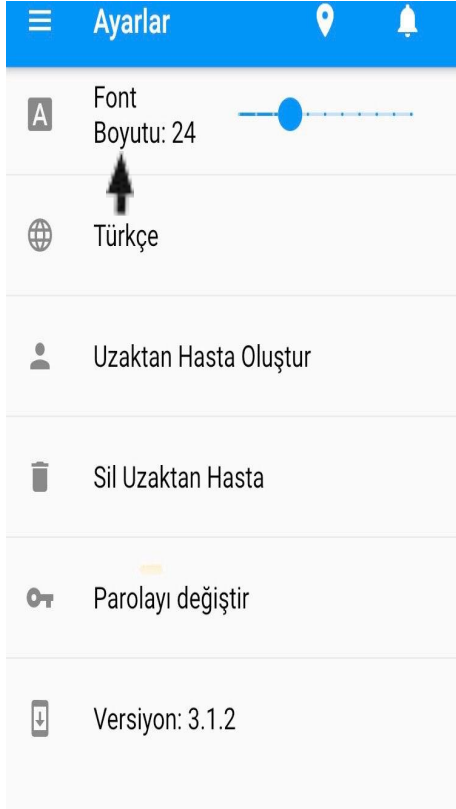Resim 11



Resim 12



Ayarlara Nasıl Ulaşabilirim?


- Açılır menüden  butonuna tıklayıp Ayarlar Sekmesine geçebilirsiniz.
- Ayarlarda “Font Boyutundan” ekran küçüklüğü veya büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz.
- Türkçe yazan yerde Dil seçeneğini değiştirebilirsiniz (Resim 12).



Resim 13



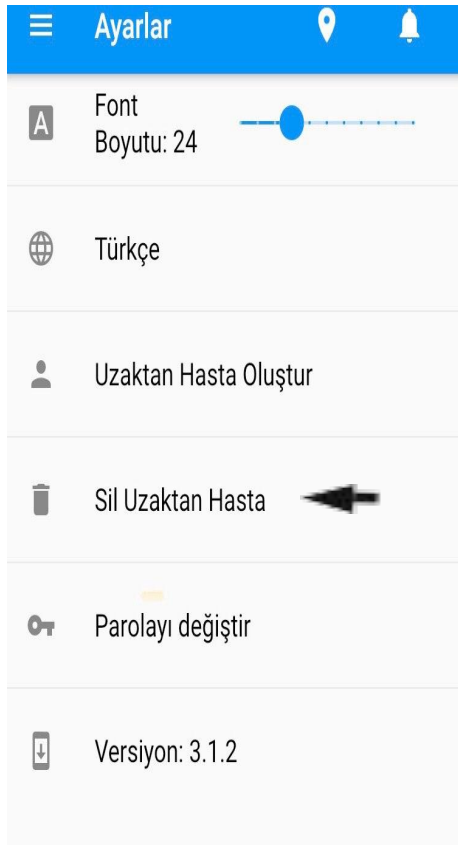Parolamı Deęiřtirebilir miyim?


- Açılır menüden  basıp “Ayarlar” butonuna tıklayıp  işaretiyle gösterilen yere tıklayıp önünüze çıkan ekrandan deęiřtirebilirsiniz. “İzin Kodu” ve girmek istedięiniz “Yeni Parola” soracaktır. İzin Kodu yerine ise size SMS ile gönderilen rakamlar girilmelidir (Resim 13).



Resim 14



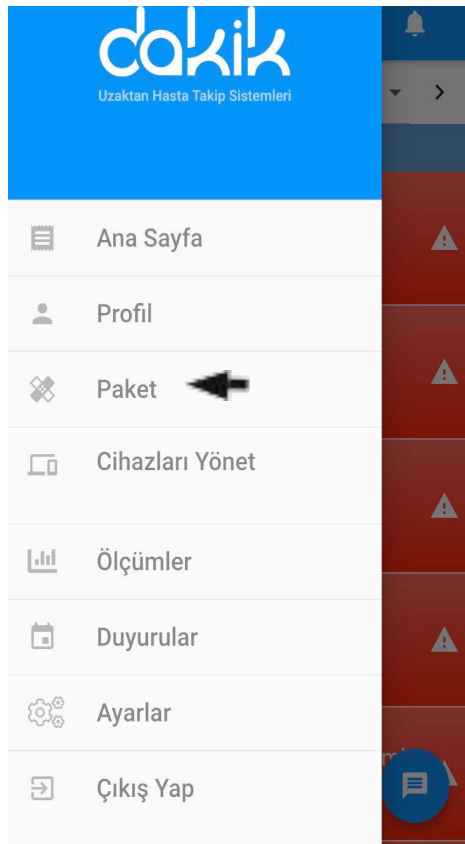Dakik Uygulamasını Silebilir miyim?


- Açılır menüden  basıp "Ayarlar" butonuna tıklayıp  işaretiyle "Sil Uzaktan Hasta" dedikten sonra bu eylem hasta kaydını silecektir. Bu uyarı onaylandıktan sonra size gönderilen 6 basamaklı sayıyı girerek işlemi tamamlayabilirsiniz yazısı gelecektir. Bu adımları izleyip silebilirsiniz (Resim 14).



Resim 15



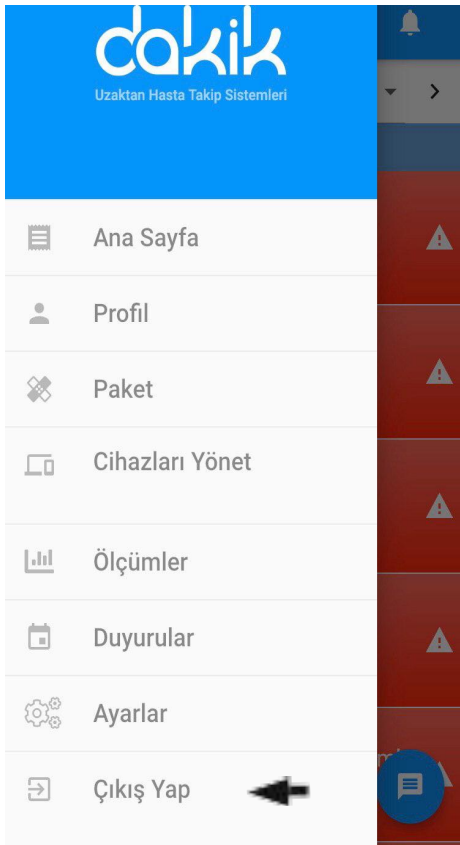Faturamı Nasıl Görebilirim ?

- Açılır menüden  tıklayıp gelen ekrandan  işaretiyle gösterilen yere tıklayıp “Faturalar” diye bir buton gelecektir önünüze ona da tıklayıp faturanıza erişebilirsiniz (Resim 15).



Resim 16


Uygulamadan Nasıl Çıkış Yapabilirim?


- Açılır menüden  tıklayıp gelen ekrandan  işaretiyle gösterilen yere tıklayıp “Çıkış Yap” butonuna basıp uygulamadan çıkış yapabilirsiniz (Resim 16).

Ölçümler	
Uzaktan EKG 28.04.2020 15:43	>
INR 27.04.2020 16:30	>
O2 Saturasyon 27.04.2020 15:53	>
Ateş 27.04.2020 15:52	>
Nabız 27.04.2020 15:50	>
Tansiyon 27.04.2020 12:01	>

Resim 17

Ölçümlerime Nasıl Ulaşabilirim ?

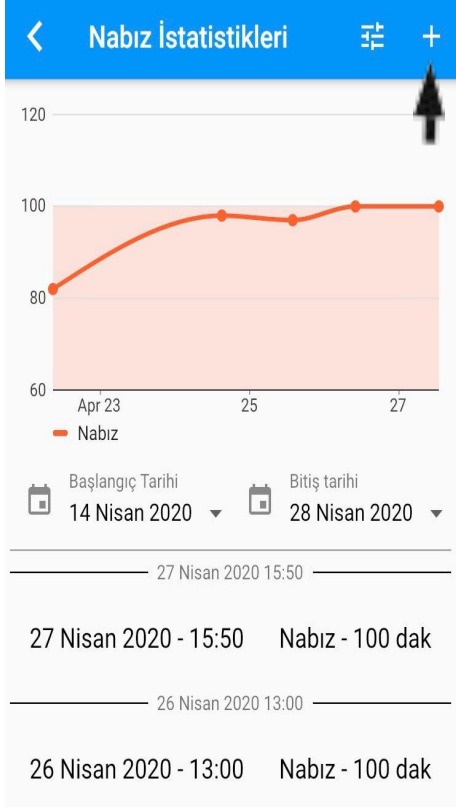
- Açılır menüden  tıklayarak “Ölçümler” butonuna tıklayarak yapmak istediğiniz ölçümü seçebilirsiniz (Resim 17).



Resim 18

Ölçümlerimi Sisteme Nasıl Girebilirim?

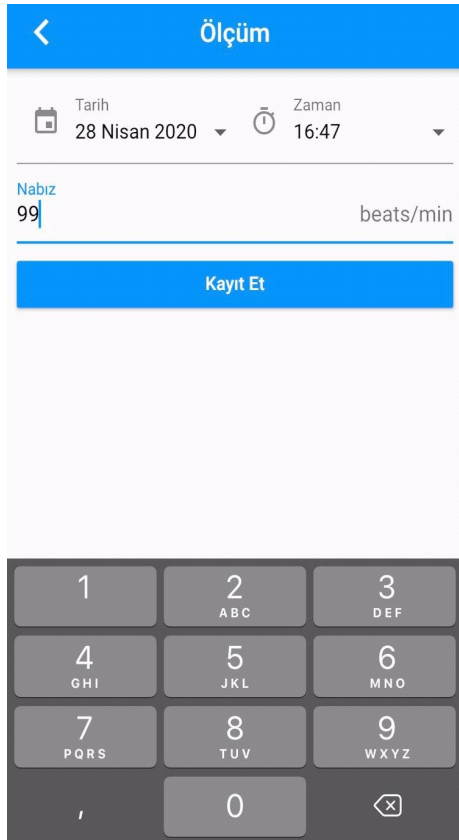- Örnek; “Nabız” seçip resim yandaki resim gibi bir ekran gelecek önünüze ➡ işaretiyle gösterilen + işaretine basıp değerlerinizi gireceğiniz ekran gelecektir. Daha önceki yaptığınız ölçümler var ise onlara da buradan görebilirsiniz (Resim 18).




Resim 19


- Gelen ekrandan değerlerinizi girip “Kayıt Et” butonuna basarak yaptığınız ölçüm değerini kaydedebilirsiniz. Tarih, Saat otomatik olarak gelecektir. Önceki günlere ait ölçümlerinizi sisteme kaydetmeyi unuttuysanız tarih seçeneğini unuttuğunuz güne ayarlayıp geçmiş ölçümlerinizi de girebilirsiniz (Resim 19).

Ölçümler	
Uzaktan EKG 28.04.2020 15:43	>
INR 27.04.2020 16:30	>
O2 Saturasyon 27.04.2020 15:53	>
Ateş 27.04.2020 15:52	>
Nabız 27.04.2020 15:50	>
Tansiyon 27.04.2020 12:01	>

Resim 20


Girmiş Olduğum Ölçümü Silebilir miyim?

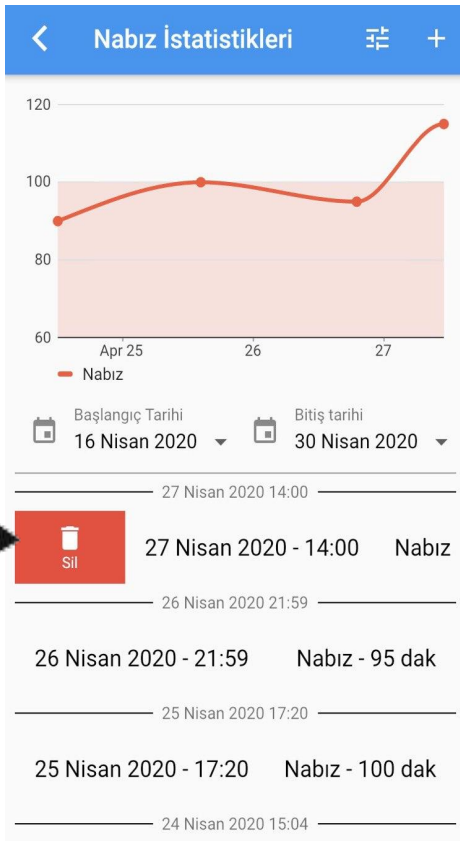- Açılır menüden  tıklayarak “Ölçümler” butonuna tıklayarak silmek istediğiniz ölçümü seçebilirsiniz.
- Örneğin; Nabız. Üstüne tıklayınız (Resim 20).



- Gelen ekranda silmek istediğiniz tarih aralığını seçip ➡ işareti gibi sağa kaydırıp “Sil” dedikten sonra tarih-saat aralığındaki geçmiş silinecek. Emin misiniz? diye sayfa gelecektir onuda onayladıktan sonra ölçümünüz sistemden silinecektir (Resim 21).

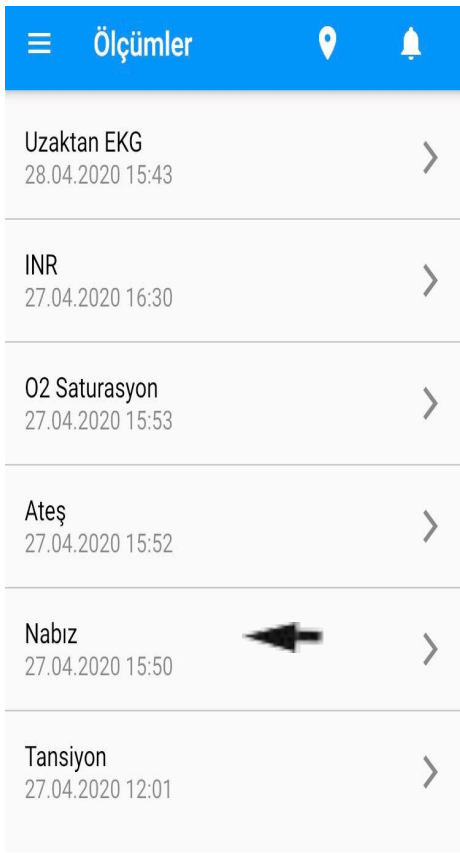
Resim 21



Ölçümler	
Uzaktan EKG 28.04.2020 15:43	>
INR 27.04.2020 16:30	>
O2 Saturasyon 27.04.2020 15:53	>
Ateş 27.04.2020 15:52	>
Nabız 27.04.2020 15:50	>
Tansiyon 27.04.2020 12:01	>

Resim 22

Girmiş Olduğum Ölçümü Değıştirebilir miyim?

- Açılır menüden  tıklayarak "Ölçümler" butonuna tıklayarak silmek istediğınız ölçümü seçebilirsiniz.
- Örneğın; Nabız. Üstüne tıklıyoruz (Resim 22).



- Gelen ekranda değiştirmek istediğiniz tarih aralığını seçip ← işareti gibi sola kaydırıp “Düzenle” dedikten sonra Ölçüm’ü Düzenleyebileceğiniz bir ekran gelecektir ekrana oradan tarih,saat ölçümünü girip “Kayıt Et” butonuna bastıktan sonra ölçümünüzü değiştirmiş olursunuz (Resim 23).

Resim 23

Ayarlar

Q Arama ayarları


- Kilit ekranı >
- Ekran >
- Ses & titreşim >
- Bildirimler >
- Ana ekran >
- Duvar Kağıdı >
- Temalar >
- Şifreler & güvenlik >
- Pil & performans >
- Uygulamalar >
- Ek ayarlar >
- Dijital Denge & ebeveyn denetimi >
- Özel özellikler >

Resim 24

Android İçin

Hatırlatma da sesli uyarı ve tüm bildirimleri alabilmeniz için adım adım yapmanız gerekenler aşağıda verilmiştir.

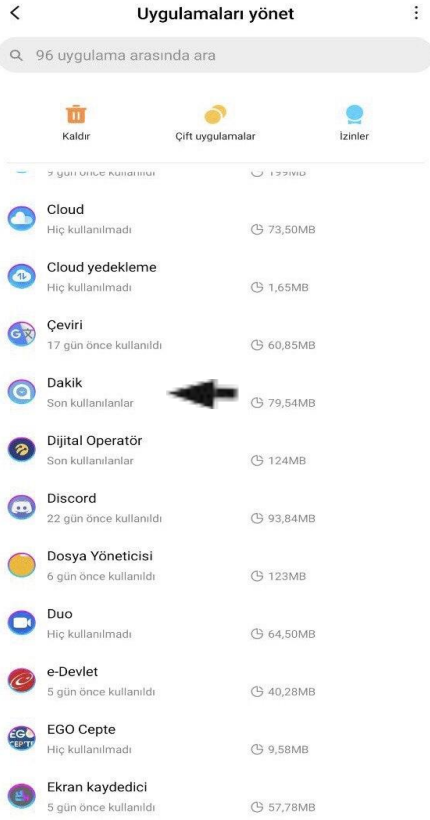- Öncelikle telefonda ayarlara giriyoruz. Uygulamalar butonuna tıklıyoruz (Resim 24).



➤ Uygulamaları yönet diye bir ekran gelecek önünüze oradan “Dakik” i tıklıyoruz (Resim 25).

Resim 25



Dakik
Sürüm: 3.2.3

Depolama	79,54MB >
Veri kullanımı	736,8KB >
Pil	%1,7 >

İzinler

Otomatik başlatma	<input type="checkbox"/>
Uygulama izinleri	>
Konum, depolama, telefon, mesajlar ve kişiler ile ilgili izinleri yönetin.	
Diğer izinler	2 izine izin verildi >
Bildirimler	Evet >
Veri kullanımını kısıtla	Wi-Fi, Mobil veri >
Pil tasarrufu	MIUI Pil Tasarrufu >


Gelişmiş ayarlar

Tam ekran modu	<input type="checkbox"/>
Seçili uygulamaların tam ekran modunda çalışmasına izin ver	
Uygulama önizlemelerini bulanıklaştır	<input type="checkbox"/>
Son kullanılanlarda uygulama önizlemelerini bulanıklaştır	

Durmaya zorla Kaldır Verileri temizle


➤ Gelen ekranda uygulama izinleri ve bildirimler diye iki ayrı buton gelecektir (Resim 26).

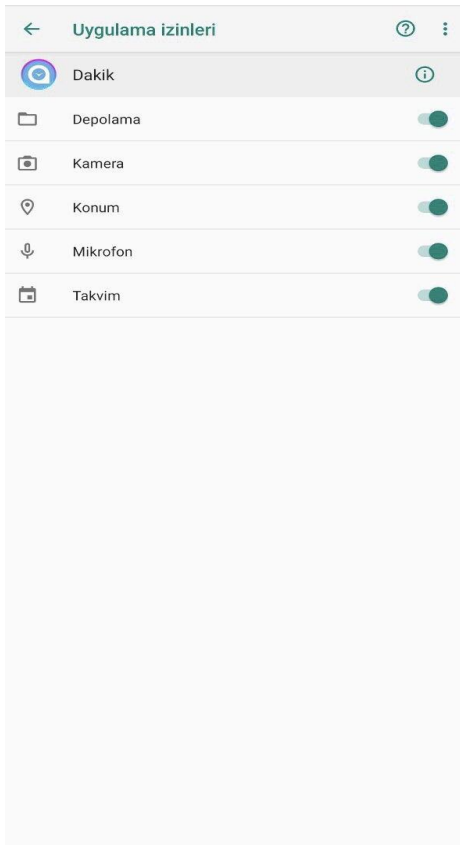Resim 26



Resim 27

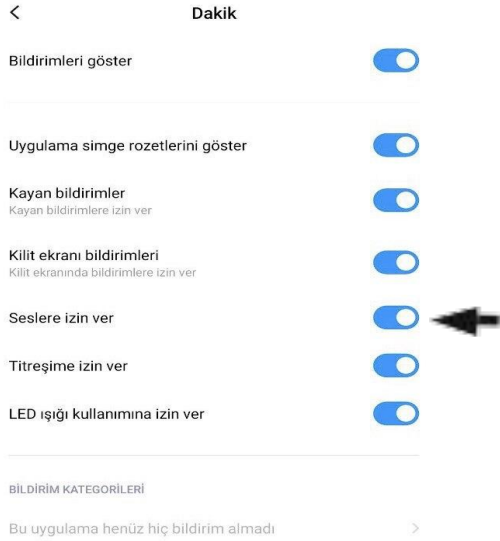➤ Uygulama izinlerini tıkladıktan sonra yandaki resimdeki gibi bir ekran gelecektir önünüze buradaki bütün bildirimlerinizi açmanız gerekmektedir (Resim 27).



Bildirimlere tıkladıktan sonra burada seslere izin ver butonunu aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Aksi halde sesli uyarı almanız mümkün değildir. Tercihe göre titreşim butonunu da aktif hale getirebilirsiniz (Resim 28).

Resim 28



Resim 29

İOS için

- Hatırlatma da sesli uyarı ve tüm bildirimleri alabilmeniz için adım adım yapmanız gerekenler aşağıda verilmiştir.
- Telefondan Ayarlar dan bildirimler butonuna tıklıyoruz (Resim 29).



App Store

Başlıklar, Sesler, İşaretler



Benim İşletmem

Başlıklar, Sesler, İşaretler



Bul

Başlıklar, Sesler, İşaretler



CamScanner

Başlıklar, Sesler, İşaretler



Dakik

Başlıklar, Sesler, İşaretler



e-Devlet

Başlıklar, Sesler, İşaretler



Ekran Süresi

Başlıklar, Sesler



Ev

Başlıklar, Sesler, İşaretler



Facebook

Başlıklar, Sesler, İşaretler



FaceTime

Başlıklar, Sesler, İşaretler



Önümüze gelen ekrandan “Dakik” i tıklıyoruz (Resim 30).

Resim 30

Bildirimlere İzin Ver

UYARILAR



Kilitli Ekran



Bildirim Merkezi



Başlıklar



Başlık Stili Geçici >

Sesler

İşaretler


SEÇENEKLER

Önizlemeleri Göster Her Zaman (Saptan... >

Bildirim Gruplama Otomatik >

➤ Buradaki tüm bildirim izinlerimizi aktif hale getirmemiz gerekli (Resim 31).

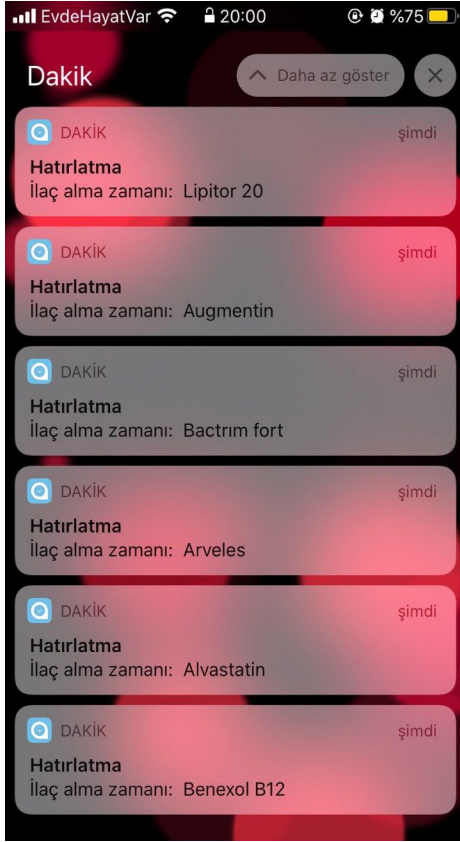
Resim 31



Resim 32



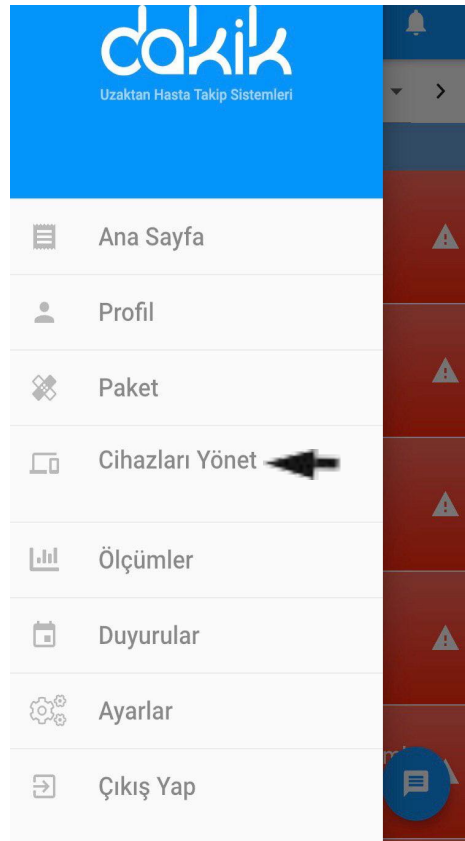İlaç Hatırlatma


- Sisteme Doktor tarafından eklenen ilaçlarınız saati geldiği zamanda sizlere sesli uyarı şeklinde hatırlatma yapacaktır (Resim 32).



Resim 33


Patch ECG ile Dakik'e Nasıl Bağlanıp Ölçüm Yapabilirim ?

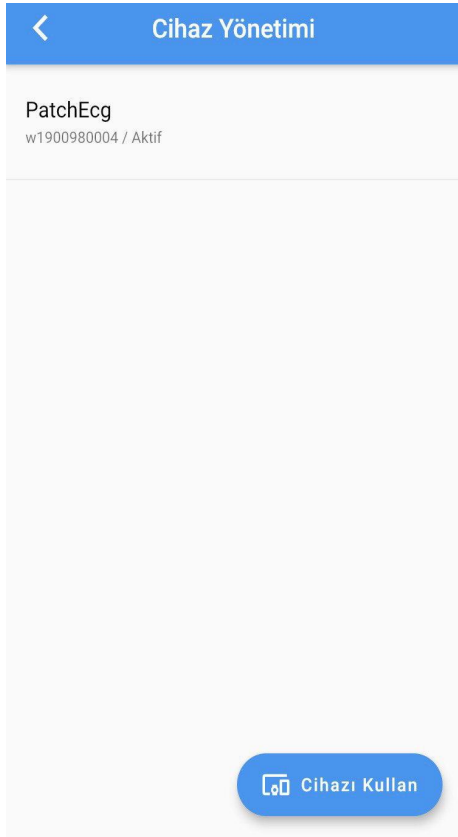- Açılır menüden  basıp  işaretiyle gösterilen yere "Cihazları Yönet" butonuna tıklıyoruz. Bluetooth' u açalım. Cihazlarımız Bluetooth ile entegre çalıştığı için ölçüm yapacağınız zaman zarfında sürekli olarak açık olması gerekli (Resim 33).




Resim 34

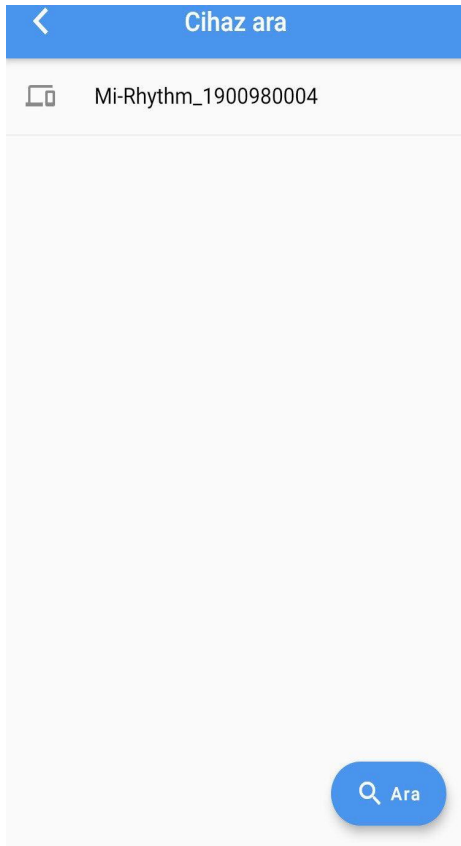- Gelen Ekrandan bağlanmak istediğiniz cihaz ismi ve seri numarasını doğruluğundan emin olup seçiyoruz (Resim 34).




Resim 35

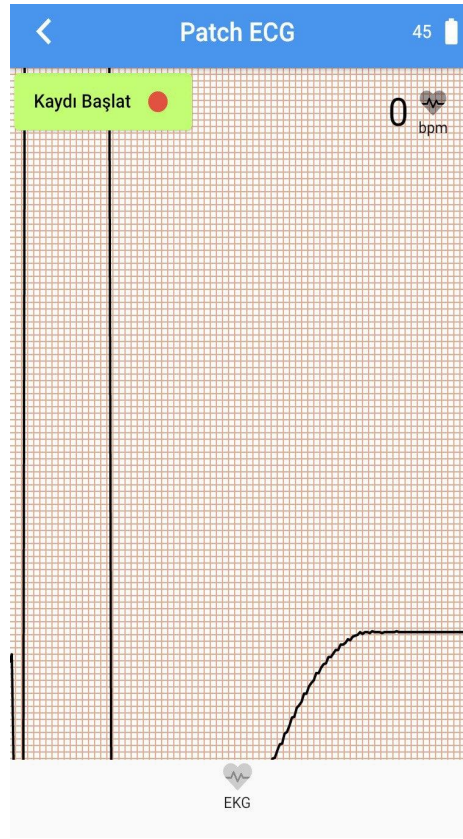- Yine gelen ekrandaki isim ve numaraları da kontrol edip tıklıyoruz (Resim 35).





Resim 27

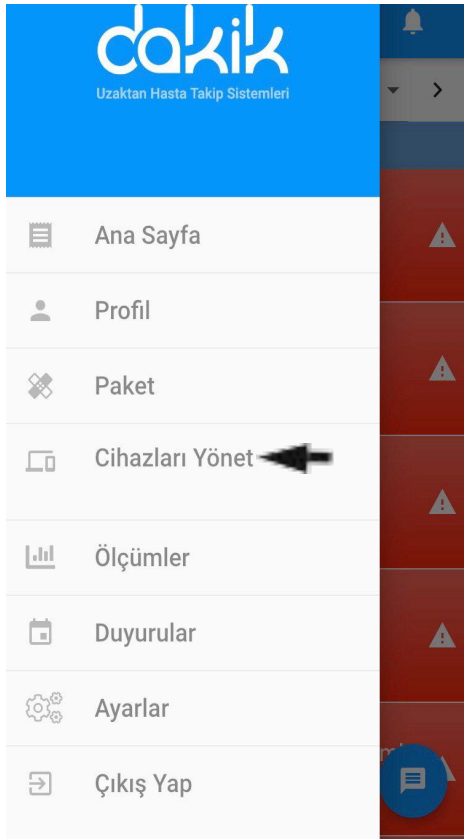- Artık Ölçüm yapmaya hazır. Buradaki veriler anlık olarak Doktor ve Hemşireye düşer (Resim 36).



Resim 37


Health Monitor ile Dakik'e Nasıl Bağlanıp Ölçüm Yapabilirim ?

- Açılır menüden  basıp  işaretiyle gösterilen yere "Cihazları Yönet" butonuna tıklıyoruz. Bluetooth' u açalım. Cihazlarımız Bluetooth ile entegre çalıştığı için ölçüm yapacağınız zaman zarfında sürekli olarak açık olması gerekli (Resim 37).




Resim 38

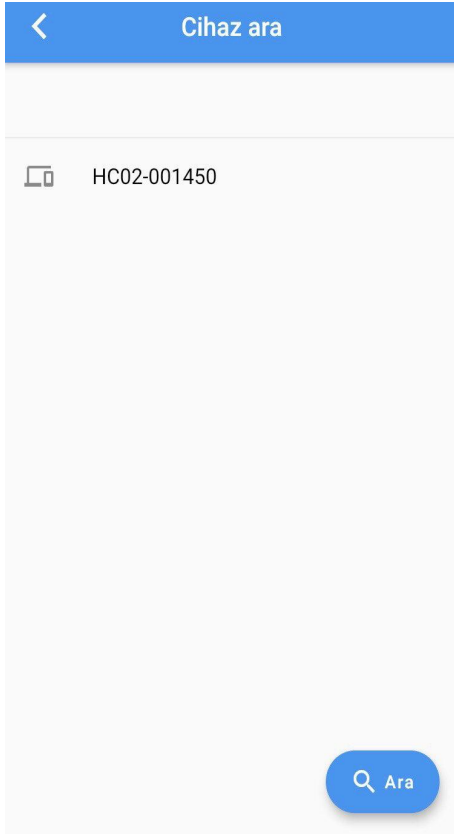- Gelen Ekrandan bağlanmak istediğiniz cihaz ismi ve seri numarasını doğruluğundan emin olup seçiyoruz (Resim 38).




Resim 39

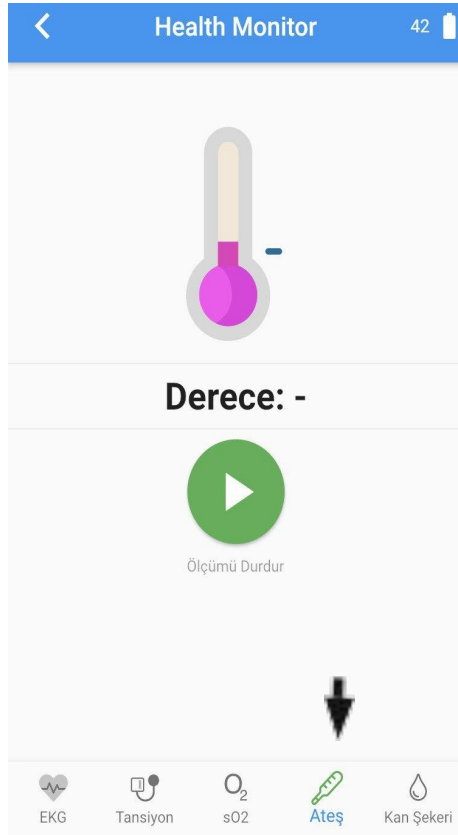- Yine gelen ekrandaki isim ve numaraları da kontrol edip tıklıyoruz (Resim 39).




- Gelen ekranda Yapmak İstedığımız ölçümü seçiyoruz. Örneğin; Ateş.
- Ölçümü başla butonuna basıyoruz (Resim 40).

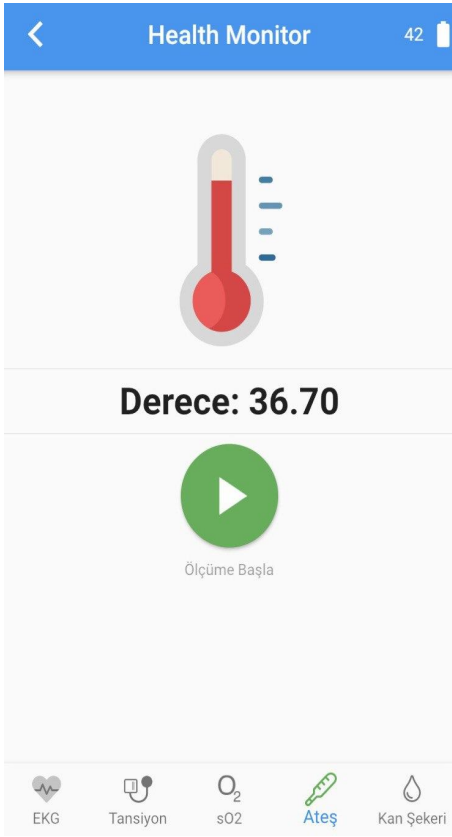Resim 40



Resim 41

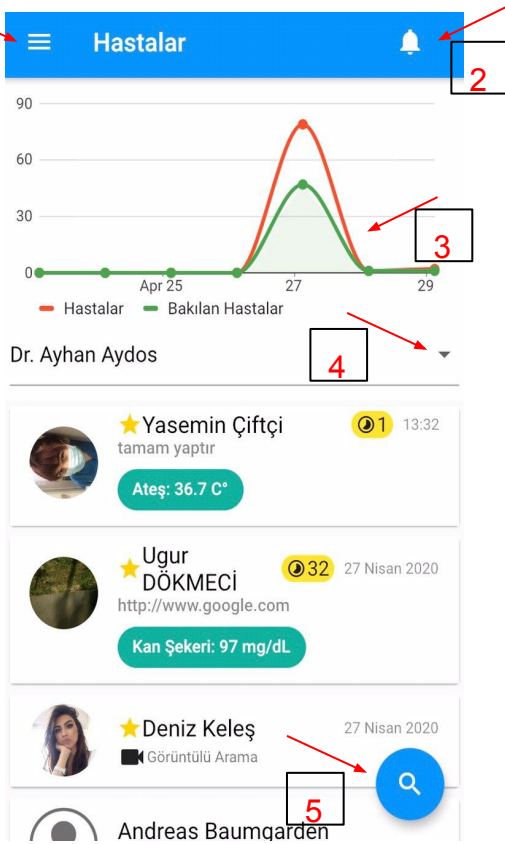
- Sistem ölçümü yapıp sonucu verecektir. Bu değerler sistem tarafından otomatik olarak kayıt altındadır.
- Sağ üst köşe de ise cihazın şarj durumunu kontrol edebilirsiniz (Resim 42).





Resim 42

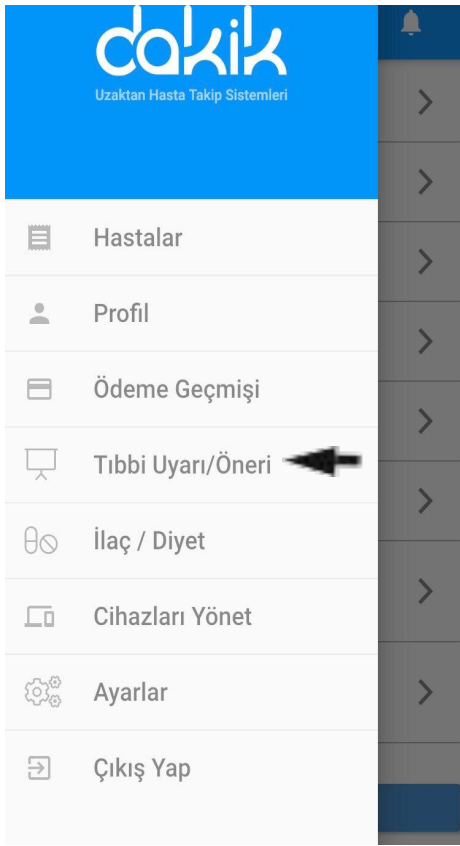Doktor Anasayfa Menüsü


- 1 ile gösterilen butona basarak yan menüye ulaşabilirsiniz. Burada Hastalar, Profil, Tıbbi Uyarı/Öneri, İlaç/Diyet, Cihazları Yönet, Ayarlar ve Çıkış Yap butonları bulunmaktadır.
- Gelen Bildirimleri 2 ile gösterilen yere tıklayıp görüntüleyebilirsiniz.
- Soru soran ve cevap verilen hasta sayılarını 3 ile gösterilen yerde Grafikselsel olarak görebilirsiniz.
- Altınızda bulunan çalışanları 4 ile gösterilen yerden görebilirsiniz.
- Hasta listesini 5 ile gösterilen yerden filtreleyebilirsiniz (Resim 42).



Tıbbi Uyarılarımı veya Önerilerimi Nasıl Ekleyebilirim ?


- Açılır Menüden  basıp  işaretiyle gösterilen yere tıklıyoruz (Resim 43).

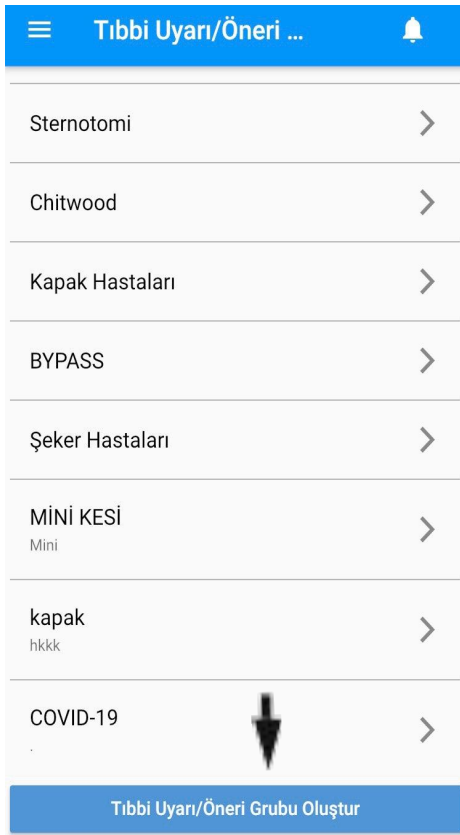Resim 43





Resim 44

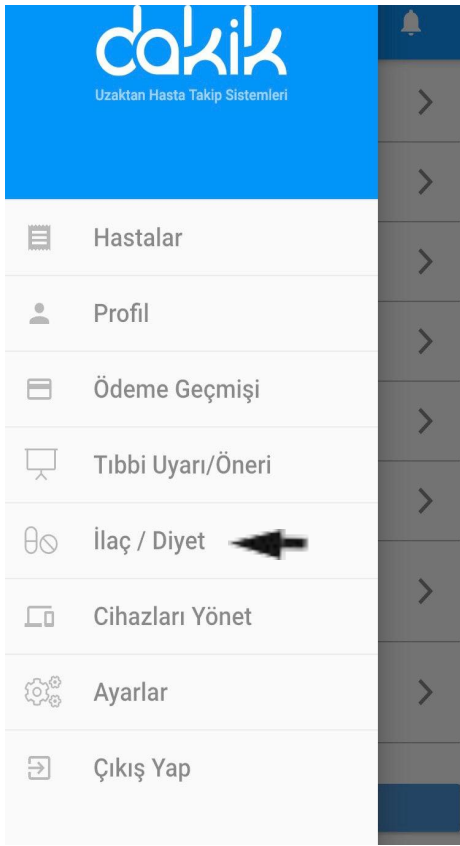
- Gelen ekrandan mevcut olan Öneri ve Uyarılar için Gruplar görünmektedir.
- Yeni Öneri/Uyarı eklemek için → işaretiyle gösterilen yere tıklayıp İsim,Açıklama yazıp "Onayla" Tuşuna basıp oluşturabilirsiniz (Resim 44).



Mevcut Olan İlaçları Nereden Görüntüleyebilirim? veya Yeni İlaç Nereden Ekleyebilirim?

- Açılır Menüden  basıp  işaretiyle gösterilen yere tıklıyoruz (Resim 45).

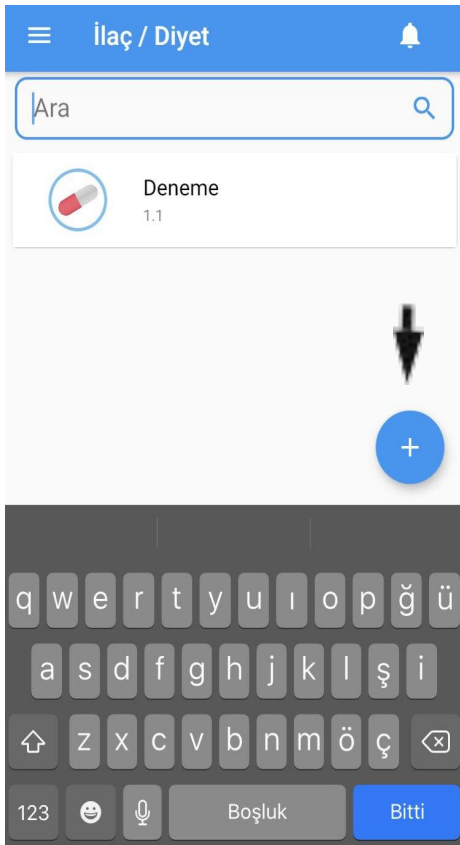Resim 45



Resim 46

- Gelen Ekrandan “Ara” tıklayıp mevcut olan kayıtlı ilaçları görebilirsiniz.
- Sağ alt tarafta bulan ➡ işaretiyle gösterilen + tıklayıp yeni ilaç ekleyebilirsiniz (Resim 46).

İlaç Tipi Formu

İsim

Açıklama


Doz
0.0

Doz Birimi ▼ Tip ▼

Kayıt Et

- Gelen ekranda İsim, Açıklama, Doz, Doz Birimi, Tip seçip “Kayıt Et” butonuna basıp sisteme yeni ilaç ekleyebilirsiniz (Resim 47).

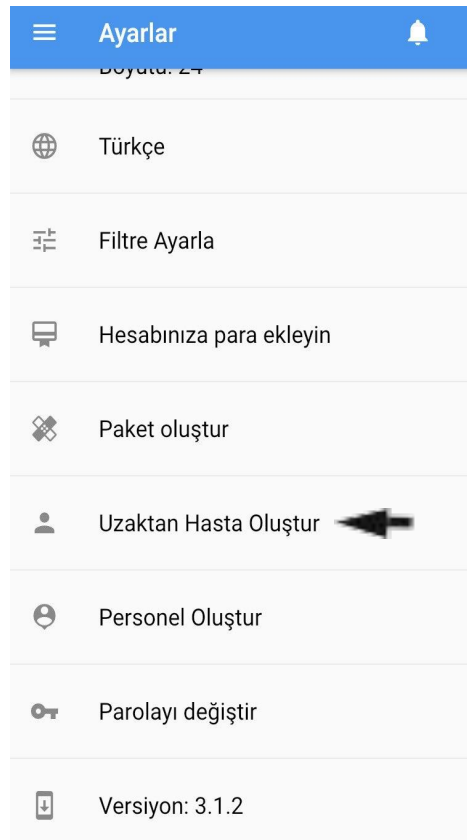
Resim 47



Resim 48



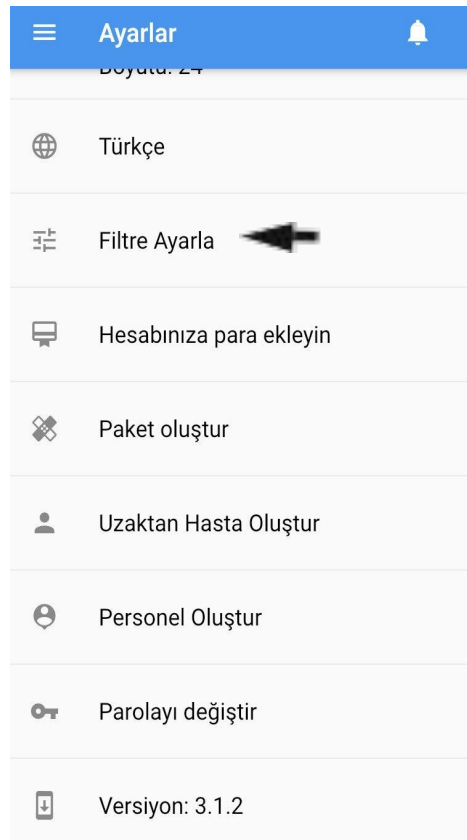Hasta Kaydını Nasıl Oluřturabilirim?


- Açılır Menüden  basıp “Ayarlar” butonuna tıklayıp  işaretiyle gösterilen yere tıklıyoruz (Resim 48).



Resim 49


Deęer Aralıklarını Nasıl Filtreleyebilirm?

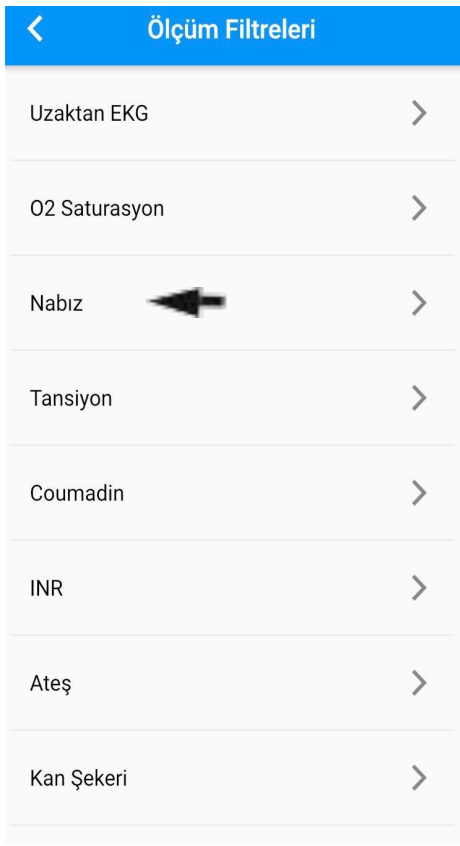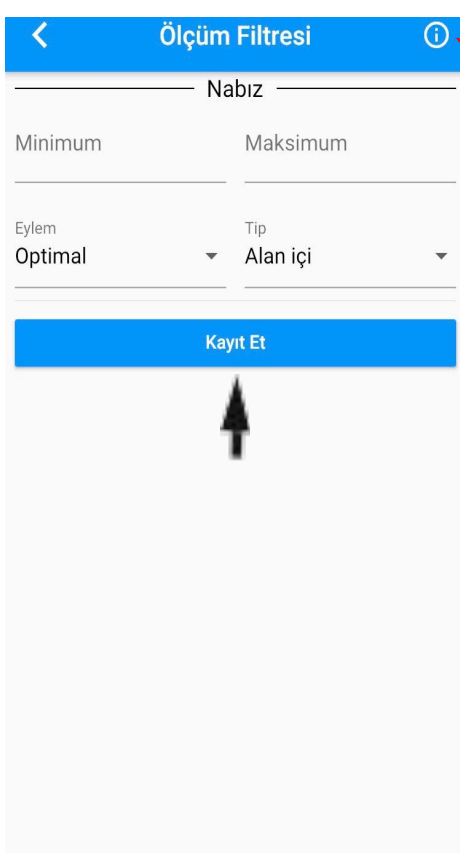- Açılır Menüden  basıp “Ayarlar” butonuna tıklayıp  işaretiyle gösterilen yere tıklıyoruz (Resim 49).




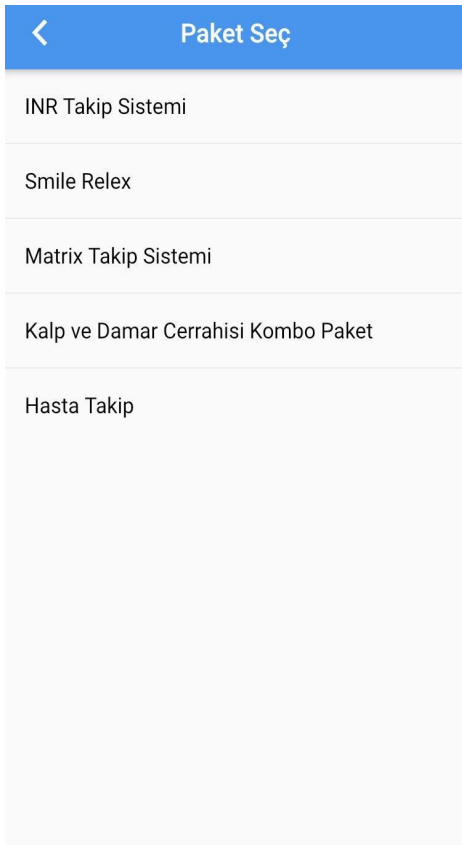
- Gelen ekrandan hangi değerli filtremek isterseniz ona tıklayabilirsiniz.
- Örn; Nabız. Üstüne tıklıyoruz (Resim 50).

Resim 50



Resim 51

- Gelen ekranda değerlerin normal aralıklarını girip “Kayıt Et” butonuna basıp grafikte görünmesini sağlayabilirsiniz.
- Yandaki resimde  İşaretine basıp “Eylem, Tip” vb. butonlarının ne işe yaradığını görebilirsiniz (Resim 51).



Resim 52

- Gelen Ekrandan İstedığınız Paketi seçebilirsiniz. Örneğin; INR Takip Sistemi.
- Paket seçtikten sonra en sonunda “Mesafeli satış sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” butonunu işaretleyip sonraki diyoruz (Resim 52).

Uzaktan Hasta Oluřtur

1 - Hasta bilgisi

İlk adı

Soyadı

Kimlik Numarası

Doğum günü

Doğum tarihi boş bırakılmaz

Cinsiyet Erkek Kadın

E-posta


Telefon

Bir ÷lke seçin

Bir řehir seçin



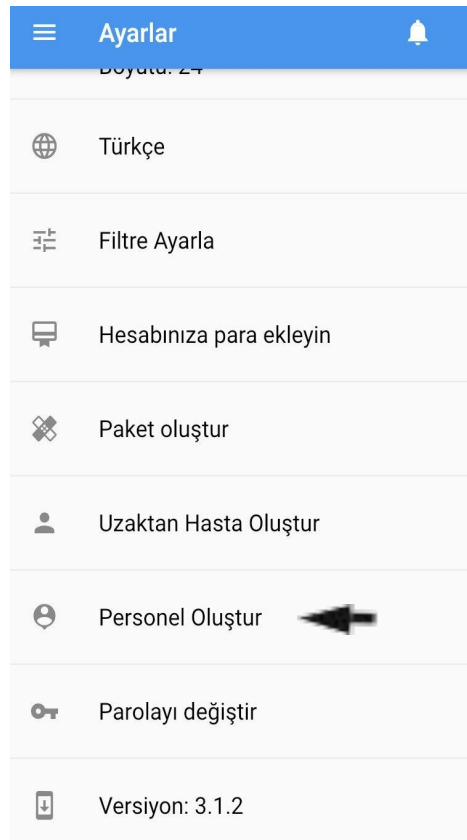Resim 53

- Gelen Ekranda hastanın bilgilerini doldurup Doktor ve Hemřiresini seçip “Kayıt Et” butonuna basarak yeni hasta kaydı oluşturabilirsiniz (Resim 53).



Resim 54

Personel Giriřini Nasıl Yapabilirim?

- Aılır Menüden  basıp “Ayarlar” butonuna tıklayıp  iřaretiyle gösterilen yere tıklıyoruz (Resim 54).

Personel Oluřtur

İlk adı

Soyadı

Ünvan

E-posta

Telefon

Kimlik Numarası

Cinsiyet Erkek Kadın


Doğum günü

Doğum tarihi boş bırakılmaz

Bir ÷lke seçin


- Gelen ekranda gerekli olan bilgileri doldurup “Kayıt Et” butonuna basarak sisteme dahil etmek istediđiniz personel giriřini yapabilirsiniz (Resim 55).

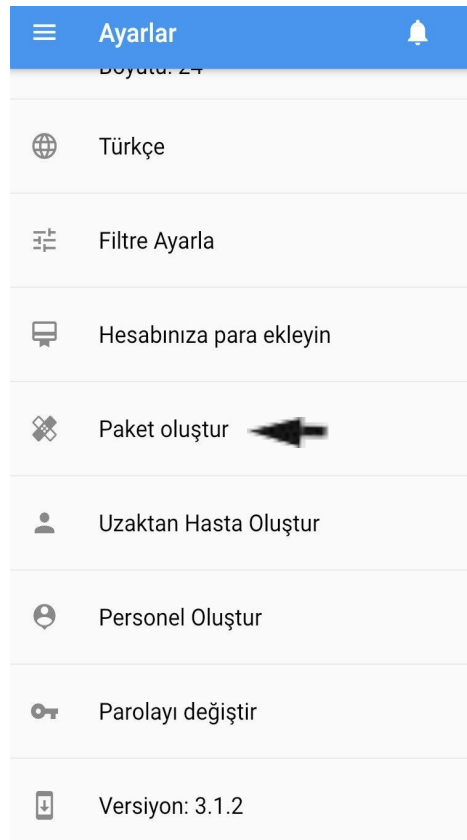Resim 55



Resim 56

Nasıl Paket Oluřturabilirim?

- Açılır Menüden  basıp "Ayarlar" butonuna tıklayıp iřaretiyle gösterilen yere tıklıyoruz (Resim 56).

< Paket oluřtur

Doktor ▾

Hemřire ▾

Uzmanlık ▾

İçerik başlıđı

İçerik

Özet

Varsayılan süre

Marifet Başlıđı

Marifet

- Gelen Ekranda gerekli olan bilgileri doldurduktan sonra “Kayıt Et” butonuna basarak yeni paket oluřturabilirsiniz (Resim 57).

Resim 57

Ödeme

Tutar

TRY

İsim

Kart Numarası

Son Kullanma Tarihi

4 2020


CCV2

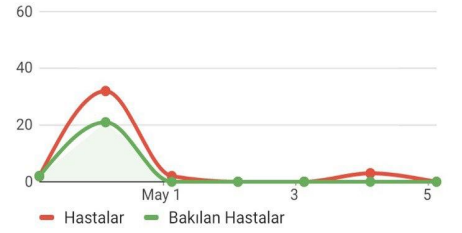
Mesafeli satış sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.

Mesafeli satış sözleşmesi Onayla







Resim 58

Hesabıma Nasıl Para Ekleyebilirim?

- Açılır Menüden  basıp “Ayarlar” butonuna basıp “Hesabınıza Para Ekleyin” butonuna tıklıyoruz.
- Gelen ekrandan gerekli olan bilgileri doldurup “Mesafeli satış sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” işaretleyip “Onayla” tuşuna basıp ekleyebiliriz (Resim 58).



Dr. Ayhan Aydos


-  **★ Yasemin Çiftçi**  4 Mayıs 2020
teşekkürler hocm
Bp Dias: 75 mm Hg
-  **★ Uğur DÖKMECİ**  30 Nisan 2020
http://www.google.com
Nabız: 82.0/dak
-  **★ Deniz Keleş**  30 Nisan 2020
Görüntülü Arama
Nabız: 85/dak



Doktor Ekranı


➤ Hastalar bölümünde ➡ işaretiyle gösterilen yerden istediğiniz hastanın ismini yazıp aratabilirsiniz (Resim 59).

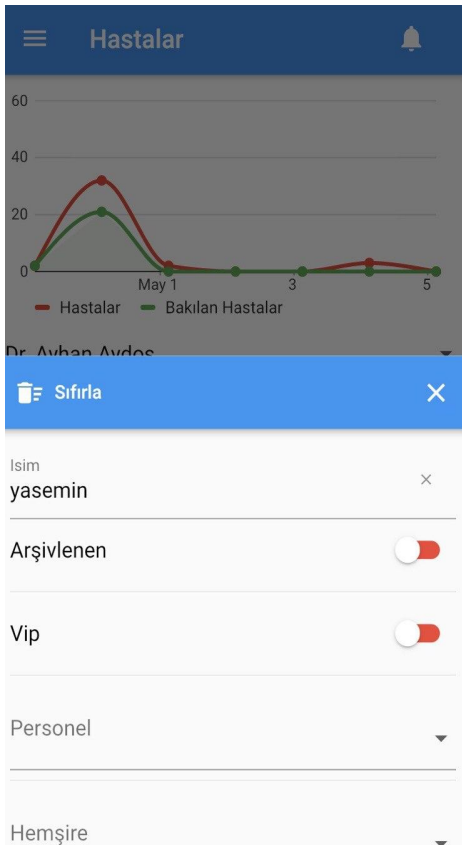Resim 59



Resim 60

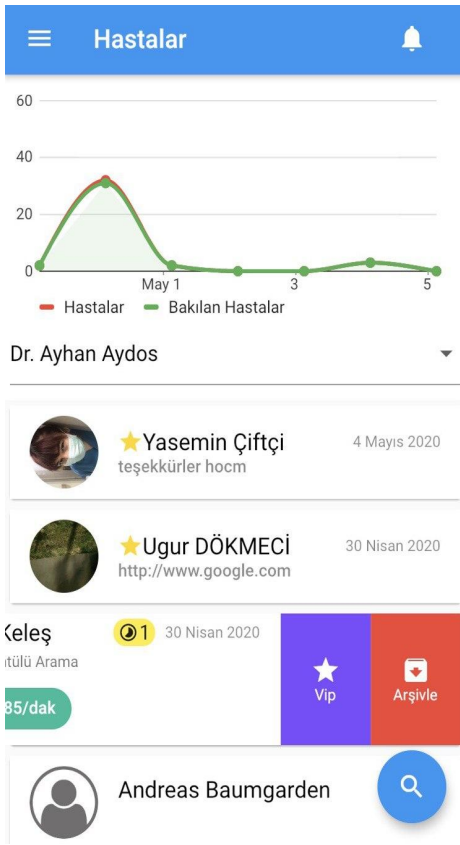- Yandaki resimde görüldüğü gibi hasta ismini yazıp hasta profiline ulaşabilirsiniz (Resim 60).



Resim 61

Doktor İçin

- Açılır menüden ☰ işaretine basıp Hastaların olduğu profile geliyoruz.
- Buradan ➡ işaretile gösterilen yerdeki hastayı sola doğru kaydırıp hastanızı “VIP” olarak üstüne basıp işaretleyebilirsiniz. VIP olaran hastanızı da aynı şekilde bu butondan “Vip değil” i seçip VIP Paketinden çıkarabilirsiniz.
- Süresi biten hastanızı da “Arşivle” deyip programını pasifleştirme bilirsiniz (Resim 61).



Resim 62

Hasta Menüsündeki Kısa Yollar

- **Remote Monitor ECG:** Burada direkt hasta ECG sine ulaşabilirsiniz.
- **Cihazları Yönet:** Cihaz tanımlatabilir, tanımlı olan cihazları görebilirsiniz.
- **Duyurular:** Hasta ile alakalı duyuruları buradan görebilirsiniz.
- **İlaçları Yönet:** İlaç ekleyebilir, dozunu değiştirebilir veya sonlandırabilirsiniz.
- **Tıbbi Uyarı/Öneriler:** Hastaya tanımlatmak istediğiniz Uyarı/Önerileri ekleyebilirsiniz.
- **Uzaktan Hasta Oluştur:** Buradan hastanıza yeni bir paket kaydı oluşturabilirsiniz.
- **Tıbbi Belgeler:** Hastayla alakalı tıbbi olan belgelere buradan ulaşabilirsiniz (Resim 62).